


UBIJAK MARSHALLA - AUTOMATYCZNY

Przeznaczony do zagęszczania próbek mineralno - asfaltowych oraz oznaczania ich stabilności i odkształcenia metodą Marshalla.

ZGODNY Z NORMAMI: PN EN 12697 - 30:2012; ASTM D 1559; BS 594; AASHTO T 245

- Podstawa z betonu wibrowanego, laminowanego bloku drewnianego, płyta ze stali miękkiej
- Młot zgodny z PN-EN 12697-30 p.5.2.3
- Nóżki mocujące ubijaka zgodne z PN-EN 12697-30 p.5.2.4
- Mechanizm ubijaka zgodny z PN-EN 12697-30 p.5.2.5
- Możliwość demontażu młota i nóżek mocujących
- Łańcuchowy napęd młota
- Napęd, młot i stopa ubijaka zamontowane w osłonie bezpieczeństwa
- Specjalny mechanizm automatycznie podnoszący młot przy otwarciu zacisków
- Automatyczny licznik uderzeń
- Zaprogramowana ilość uderzeń
- Automatyczne zatrzymanie młota po zakończeniu badania
- Fabrycznie zaprogramowane ilości uderzeń
- Zasilanie: 3 Ph + N + PE 50 Hz 400V, wtyczka pasująca do polskich gniazdek
- Możliwość badania prób o 101,6 mm
- Możliwość badania prób o 150 mm (opcjonalnie)

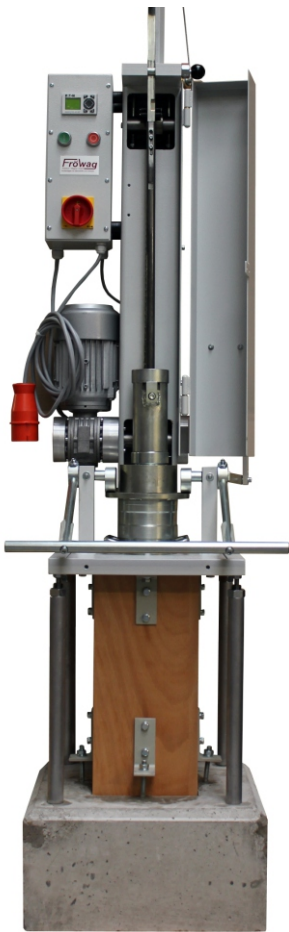

W ZESTAWIE

- ✚ Młot Marshalla wg PN EN 12697-30 do prób o 101,6 mm
- ✚ Młot Marshalla wg PN EN 12697-30 do prób o 150 mm (opcjonalnie)
- ✚ Napęd elektryczny z łańcuchowym systemem podnoszenia młota
- ✚ Licznik uderzeń
- ✚ Panel sterowania - wbudowany lub zewnętrzny
- ✚ Podstawa cementowa (opcjonalnie)
- ✚ Podstawa drewniana (opcjonalnie)
- ✚ Możliwość montażu panelu sterowania na froncie szafy dźwiękochłonnej (opcjonalnie)

AKCESORIA DODATKOWE

- ✚ Zestaw cylindrów Marshalla - 3 szt.
- ✚ Kołnierz (nadstawka) do formy Marshalla
- ✚ Płyta bazowa do formy Marshalla
- ✚ Lejek opadowy do formy Marshalla
- ✚ Drewniana szafa dźwiękochłonna
- ✚ Podgrzewacz do młota Marshalla
- ✚ Podstawa do próbek Marshalla
- ✚ Wyciskarka do próbek Marshalla

... niemiecka jakość, precyzja i profesjonalizm ...

Fröwag

Fröhlich + Wagner GmbH
Prüfanlagen für Baustoffe und Umwelt

MADE
IN
GERMANY

